

ENGLISH

Start Here


Quick Start Guide

For in vitro diagnostic use only

For use with the MiniMed™ 770G and MiniMed™ 780G systems with **Bluetooth®** wireless technology



WARNING

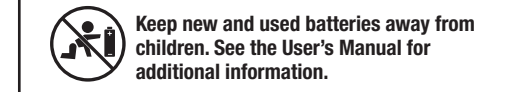

- **This Quick Start Guide does not replace the User's Manual for your Accu-Chek Guide Link blood glucose meter. The User's Manual contains important cleaning and disinfecting procedures and additional information.**
- **The meter and lancing device are for single patient use. Do not share them with anyone, including other family members! Do not use on multiple patients!**
- **All parts of the kit are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases from bloodborne pathogens, even after you have performed cleaning and disinfecting.**

NOTE


- **Always have a spare set of batteries.**
- **Battery life may vary due to factors such as temperature and battery manufacturer.**

Meter Overview




- 1 Display
 - 2 Back Button
 - 3 Up Arrow and Down Arrow Buttons
 - 4 Power/Set/OK Button
 - 5 Test Strip Slot with Light
 - 6 Battery Door
 - 7 Micro USB Port*
 - 8 Test Strip Ejector
- *USB functionality is not available for this meter.

Set the Meter Language

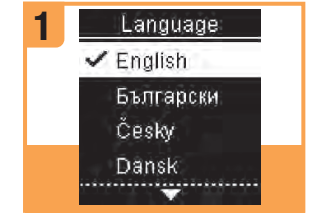

Turn the meter on by briefly pressing **OK**. **Language** appears. Press **Left** or **Right** to highlight the desired language.

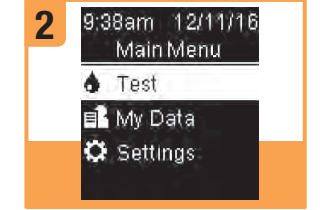


Press **OK** to set the language and return to **Main Menu**.

Pair the Meter and Insulin Pump




The Accu-Chek Guide Link meter can automatically send blood glucose results to the MiniMed™ 770G and MiniMed™ 780G systems with Bluetooth® wireless technology. This feature eliminates the need to manually enter your blood glucose result on the insulin pump. Refer to the MiniMed™ 770G and MiniMed™ 780G systems User Guide for pairing instructions.


Set up the Lancing Device

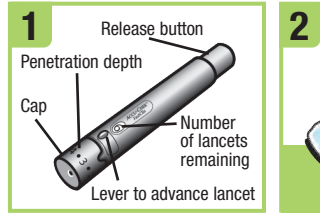

Familiarize yourself with the Accu-Chek FastClix lancing device and the lancet drum.

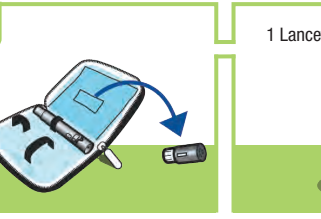


Get the lancet drum from the pocket in the carry case.

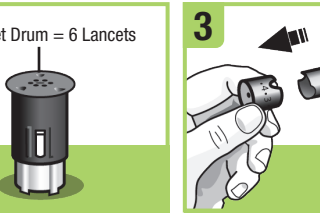


NOTE
Each lancet drum contains 6 sterile lancets. You can perform 6 tests before replacing it.



NOTE
Do not remove the lancet drum until all 6 lancets are used since the drum cannot be reused once it has been removed from the lancing device.

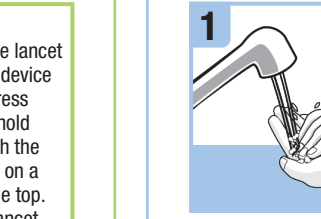


Place the cap back on the lancing device. Make sure the notch on the cap lines up with the notch on the lancing device.

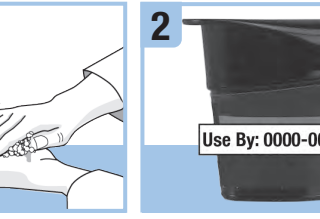

Adjust the lancet depth to a comfortable penetration level. Start at 2. For tougher skin, dial to a higher number.




Using the lancing device: By pressing the release button all the way down, the lancing device primes and pricks with 1 click.

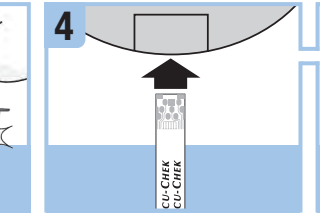

When ready to test...

Perform a Blood Glucose Test

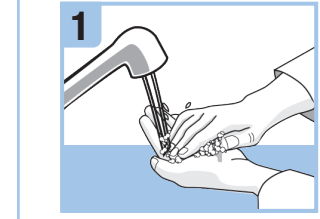


Wash and dry your hands thoroughly **before** and **after** you perform a blood glucose test.



Check the **Use By** date on the test strip container. Do not use test strips past the **Use By** date.




Remove a test strip from the test strip container. Close the cap tightly.

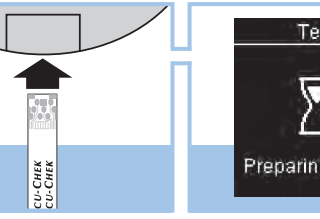


Insert the metallic end of the test strip into the meter.




The meter turns on. **Preparing to test** appears.

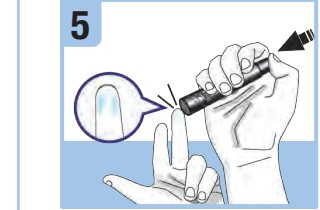


Press the lancing device firmly against the side of your fingertip and press the release button all the way down to prick your finger.

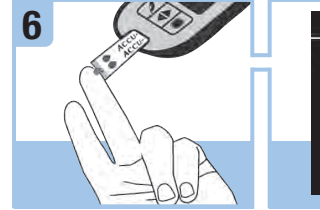

Touch the **yellow edge** of the test strip to the blood drop. Do not put blood on top of the test strip. Remove your finger from the test strip when **Analyzing** appears. Failure to move your finger away from the test strip could give inaccurate test results.

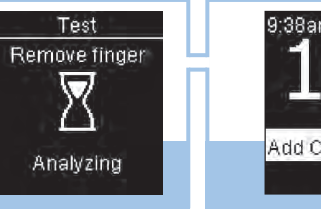

The test result appears on the display in less than 4 seconds. Press **OK** to automatically send result to a paired pump. If **OK** is not pressed, there will be a delay seeing the blood glucose result on the paired pump.

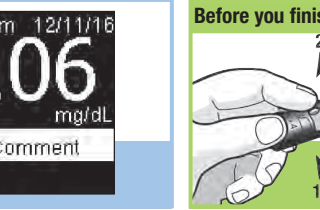

Prepare the lancing device for the next test. Slide the lever over and back once to advance to the next lancet. The window shows the number of lancets remaining.

Roche Diabetes Care, Inc.
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK GUIDE, and FASTCLIX are trademarks of Roche.
The **Bluetooth®** word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Roche is under license.
MiniMed is a registered trademark of Medtronic, Inc.



Empiece aquí

Guía rápida de instrucciones


Sólo para diagnóstico in vitro

Para el uso con los sistemas
MiniMed™ 770G y MiniMed™ 780G
con tecnología inalámbrica
Bluetooth®

Medtronic

Roche

ADVERTENCIA

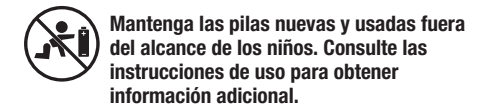

Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Consulte las instrucciones de uso para obtener información adicional.

- Esta guía rápida de instrucciones no reemplaza a las instrucciones de uso del medidor de glucemia Accu-Chek Guide Link. Las instrucciones de uso contienen instrucciones importantes de limpieza y desinfección así como información adicional.
- El medidor y el dispositivo de punción están previstos únicamente para uso de un paciente individual. ¡No los comparta con nadie, ni siquiera con miembros de su familia! ¡No usar en varios pacientes!
- Todas las piezas del kit representan un peligro biológico y pueden transmitir enfermedades infecciosas a causa de patógenos nacidos de la sangre, incluso después de limpiarlas y desinfectarlas.

NOTA

- Tenga siempre a mano un juego de pilas de reserva.
- La duración de la pila puede variar a causa de distintos factores, tales como la temperatura y el fabricante de la pila.


Vista general del medidor




- 1 Pantalla
- 2 Botón Atrás
- 3 Botones flecha arriba y flecha abajo
- 4 Botón Power/Set/OK
- 5 Ranura de la tira reactiva con luz
- 6 Tapa del compartimento de las pilas
- 7 Puerto micro USB*
- 8 Eyector de tiras reactivas

*La funcionalidad USB no está disponible para este medidor.

Ajustar el idioma del medidor

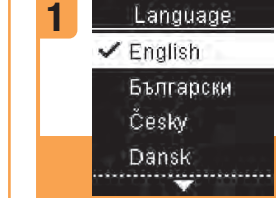

Encienda el medidor pulsando . Aparece el menú **Language** (Idioma). Pulse o para resaltar el idioma deseado.

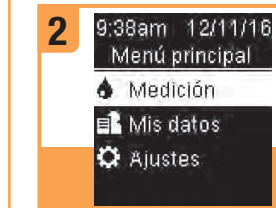

Pulse para guardar el idioma y volver al **Menú principal**.

Sincronizar el medidor y la bomba de insulina




El medidor Accu-Chek Guide Link puede enviar automáticamente los resultados de glucemia a los sistemas MiniMed™ 770G y MiniMed™ 780G con tecnología inalámbrica Bluetooth®. Esta función elimina la necesidad de introducir manualmente el resultado de glucemia en la bomba de insulina. Consulte las instrucciones de sincronización en la guía del usuario de los sistemas MiniMed™ 770G y MiniMed™ 780G.


Ajustar el dispositivo de punción




Familiarícese con el dispositivo de punción y el cartucho de lancetas Accu-Chek FastClix.

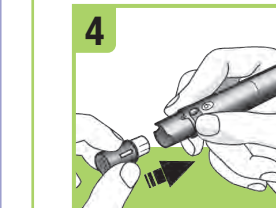


Inserte el cartucho de lancetas, con el extremo blanco por delante, en el dispositivo de punción. Empuje el cartucho de lancetas hasta el tope, hasta que encaje perceptiblemente en su sitio.

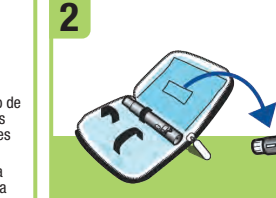


1 cartucho de lancetas = 6 lancetas

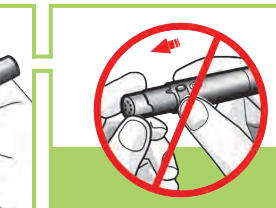


Vuelva a poner el capuchón en el dispositivo de punción. Asegúrese de que la muesca del capuchón esté alineada con la muesca del dispositivo de punción.

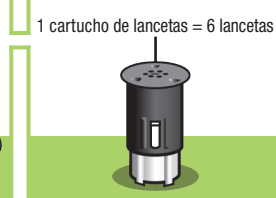


NOTA
Cada cartucho de lancetas contiene 6 lancetas estériles. Puede realizar 6 mediciones antes de cambiar el cartucho de lancetas.

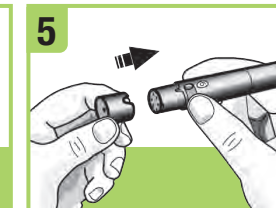


Ajuste la profundidad de punción a un nivel confortable. Empiece con la profundidad 2. Si su piel es callosa o gruesa, empiece con un ajuste mayor.

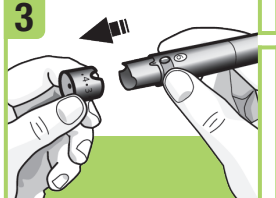

ADVERTENCIA
No debe insertar el cartucho de lancetas en el dispositivo de punción y pulsar al mismo tiempo el botón disparador, o sujetar el dispositivo de punción con el botón disparador posando sobre una superficie tal como lo puede ser una mesa. Si lo hiciera, posiblemente se dispararía una lanceta y podría pincharse de forma involuntaria.

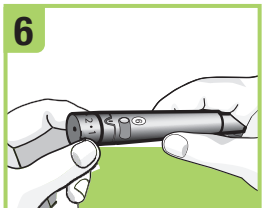


Usar el dispositivo de punción: Al pulsar el botón disparador hasta el tope, el dispositivo de punción se tensa y pincha con 1 clic.

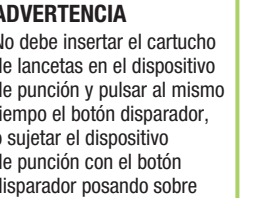

ADVERTENCIA
No debe insertar el cartucho de lancetas en el dispositivo de punción y pulsar al mismo tiempo el botón disparador, o sujetar el dispositivo de punción con el botón disparador posando sobre una superficie tal como lo puede ser una mesa. Si lo hiciera, posiblemente se dispararía una lanceta y podría pincharse de forma involuntaria.



Cuando esté listo para la medición...

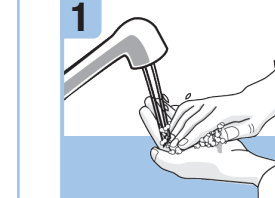

ADVERTENCIA
No debe insertar el cartucho de lancetas en el dispositivo de punción y pulsar al mismo tiempo el botón disparador, o sujetar el dispositivo de punción con el botón disparador posando sobre una superficie tal como lo puede ser una mesa. Si lo hiciera, posiblemente se dispararía una lanceta y podría pincharse de forma involuntaria.



Cuando esté listo para la medición...

Realizar una medición de glucemia



Lávese bien las manos y séquelas **antes y después** de realizar una medición de glucemia.




Coloque el dispositivo de punción presionando firmemente contra el lateral de la yema del dedo y pulse el botón disparador hasta el tope para efectuar una punción.




Compruebe la fecha de caducidad (**Use By**) del tubo de tiras reactivas. No use las tiras reactivas pasada su fecha de caducidad (**Use By**).




Roce el **borde amarillo** de la tira reactiva con la gota de sangre. No aplique sangre encima de la tira reactiva. Retire el dedo de la tira reactiva cuando aparezca **Analizando**. Si no retira el dedo de la tira reactiva, esto podría causar resultados de medición incorrectos.

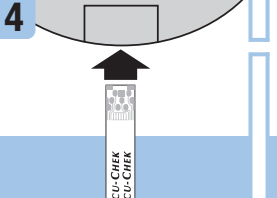

Inserte el extremo metálico de la tira reactiva en el medidor.

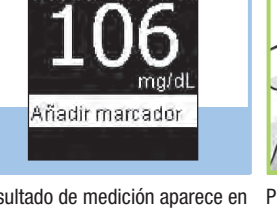

El resultado de medición aparece en la pantalla en menos de 4 segundos. Pulse para enviar el resultado automáticamente a una bomba sincronizada. Si no se pulsa , el resultado de glucemia se visualizará con retardo en la bomba sincronizada.

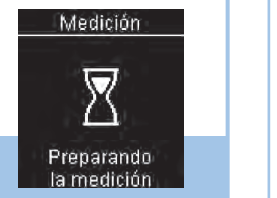

El medidor se enciende. Aparece **Preparando la medición**.



Prepare el dispositivo de punción para la siguiente medición. Para avanzar hasta la siguiente lanceta, deslice la palanquita hacia delante y hacia atrás una vez. La ventana muestra el número de lancetas restantes.

Roche Diabetes Care, Inc.
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK GUIDE y FASTCLIX son marcas registradas de Roche. La palabra de la marca **Bluetooth®** así como sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de los mismos por Roche se ha realizado bajo licencia. MiniMed es una marca registrada de Medtronic, Inc.

© 2021 Roche Diabetes Care
08163022002-0721

