

Start Here

Quick Start Guide


For in vitro diagnostic use only

For use with the MiniMed™ 770G and MiniMed™ 780G systems with Bluetooth® wireless technology

Medtronic

Roche

WARNING

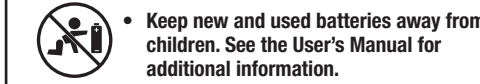

- Keep new and used batteries away from children. See the User's Manual for additional information.
- This Quick Start Guide does not replace the User's Manual for your Accu-Chek Guide Link blood glucose meter. The User's Manual contains important cleaning and disinfecting procedures and additional information.
- The meter and lancing device are for single patient use. Do not share them with anyone, including other family members! Do not use on multiple patients!
- All parts of the kit are considered biohazardous and can potentially transmit infectious diseases from bloodborne pathogens, even after you have performed cleaning and disinfecting.

NOTE

- Always have a spare set of batteries.
- Battery life may vary due to factors such as temperature and battery manufacturer.

Meter Overview




- 1 Display
- 2 Back Button
- 3 Up Arrow and Down Arrow Buttons
- 4 Power/Set/OK Button
- 5 Test Strip Slot with Light
- 6 Battery Door
- 7 Micro USB Port*
- 8 Test Strip Ejector

*USB functionality is not available for this meter.

Set the Meter Language



Turn the meter on by briefly pressing **OK**. **Language** appears. Press **Up Arrow** or **Down Arrow** to highlight the desired language.

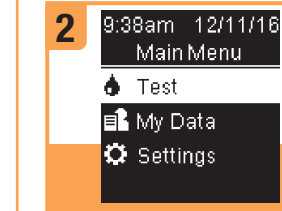


Press **OK** to set the language and return to **Main Menu**.

Pair the Meter and Insulin Pump




The Accu-Chek Guide Link meter can automatically send blood glucose results to the MiniMed™ 770G and MiniMed™ 780G systems with Bluetooth® wireless technology. This feature eliminates the need to manually enter your blood glucose result on the insulin pump. Refer to the MiniMed™ 770G and MiniMed™ 780G systems User Guide for pairing instructions.

Set up the Lancing Device

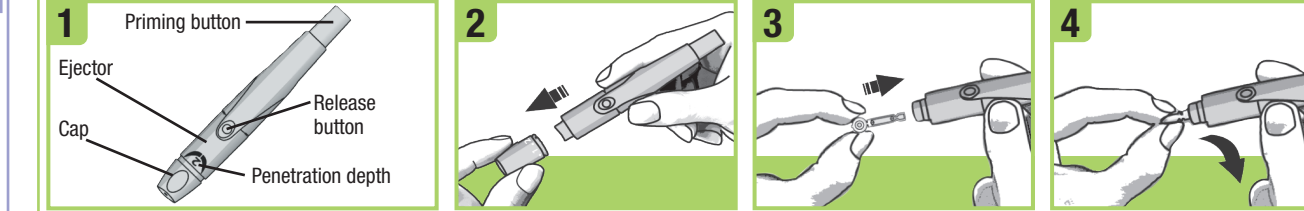

Familiarize yourself with the Accu-Chek Softclix lancing device.

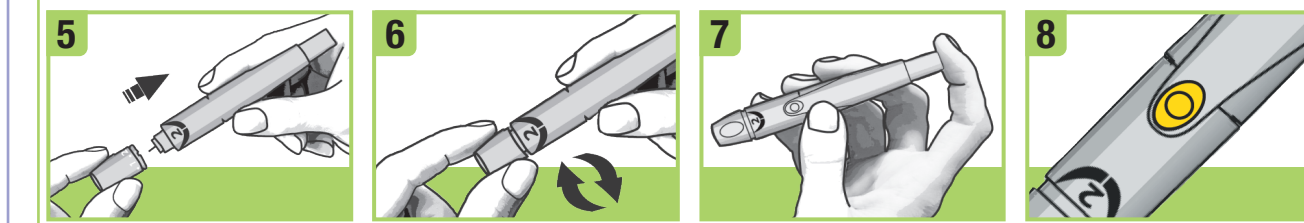

Place the cap back on the lancing device. Make sure the notch on the cap lines up with the notch on the lancing device.

Adjust the lancet depth to a comfortable penetration depth. Start at 2. For tougher skin, rotate to a higher number.

Press the priming button in as far as it will go, like a pen. Do not press the release button while pressing the priming button.

The release button turns yellow when the lancing device is ready. Set the lancing device aside until you are ready to perform a fingerstick.

Perform a Blood Glucose Test




Wash and dry your hands thoroughly **before** and **after** you perform a blood glucose test.

Check the **Use By** date on the test strip container. Do not use test strips past the **Use By** date.

Remove a test strip from the test strip container. Close the cap tightly.

Insert the metallic end of the test strip into the meter.

The meter turns on. **Preparing to test** appears.

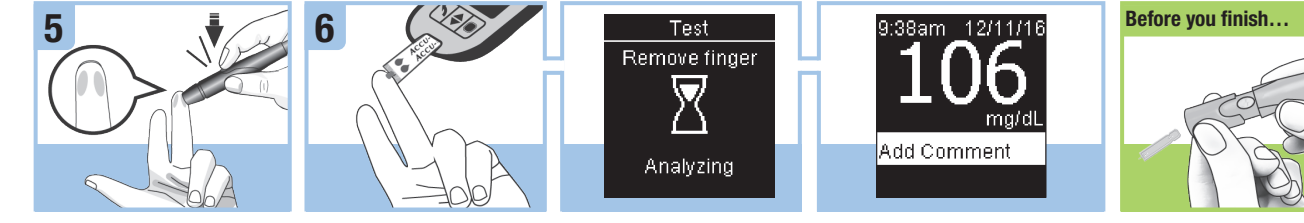

Press the lancing device firmly against the side of your fingertip and press the yellow release button to prick your finger.

Touch the **yellow edge** of the test strip to the blood drop. Do not put blood on top of the test strip. Remove your finger from the test strip when **Analyzing** appears.

The test result appears on the display in less than 4 seconds. Press **OK** to automatically send the test result to a paired pump. If **OK** is not pressed, there will be a delay seeing the blood glucose result on the paired pump.

Before you finish... Remove the lancing device cap. Point the lancet away from you. Slide out the ejector to release the lancet.

Roche Diabetes Care, Inc.
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256, USA
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK GUIDE, and SOFTCLIX are trademarks of Roche.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Roche is under license.
MiniMed is a registered trademark of Medtronic, Inc.

© 2022 Roche Diabetes Care
09636153001-0422



Empiece aquí

Guía rápida de instrucciones

Solo para diagnóstico in vitro

Para el uso con los sistemas
MiniMed™ 770G y MiniMed™ 780G
con tecnología inalámbrica
Bluetooth®

Medtronic

Roche

ADVERTENCIA

- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Consulte las instrucciones de uso para obtener información adicional.

- Esta guía rápida de instrucciones no reemplaza a las instrucciones de uso del medidor de glucemia Accu-Chek Guide Link. Las instrucciones de uso contienen procedimientos importantes de limpieza y desinfección así como información adicional.
- El medidor y el dispositivo de punción están previstos únicamente para uso de un paciente individual. ¡No los comparta con nadie, ni siquiera con miembros de su familia! ¡No usar en varios pacientes!
- Todas las piezas del kit representan un peligro biológico y pueden transmitir enfermedades infecciosas a causa de patógenos nacidos de la sangre, incluso después de limpiarlas y desinfectarlas.

NOTA


- Tenga siempre a mano un juego de pilas de reserva.
- La duración de la pila puede variar a causa de distintos factores, tales como la temperatura y el fabricante de la pila.

Vista general del medidor




- 1 Pantalla
 - 2 Botón Atrás
 - 3 Botones flecha arriba y flecha abajo
 - 4 Botón Power/Set/OK
 - 5 Ranura de la tira reactiva con luz
 - 6 Tapa del compartimento de las pilas
 - 7 Puerto micro USB*
 - 8 Eyector de tiras reactivas
- *La funcionalidad USB no está disponible para este medidor.

Ajustar el idioma del medidor

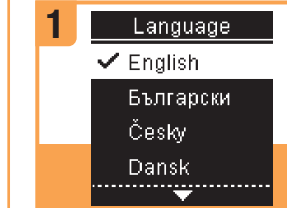

Encienda el medidor pulsando brevemente. Aparece el menú **Language** (Idioma). Pulse o para resaltar el idioma deseado.

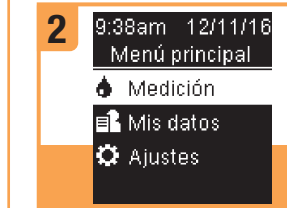


Pulse para guardar el idioma y volver al **Menú principal**.

Sincronizar el medidor y la bomba de insulina



El medidor Accu-Chek Guide Link puede enviar automáticamente los resultados de glucemia a los sistemas MiniMed™ 770G y MiniMed™ 780G con tecnología inalámbrica *Bluetooth®*. Esta función elimina la necesidad de introducir manualmente el resultado de glucemia en la bomba de insulina. Consulte las instrucciones de sincronización en la guía del usuario de los sistemas MiniMed™ 770G y MiniMed™ 780G.

Ajustar el dispositivo de punción

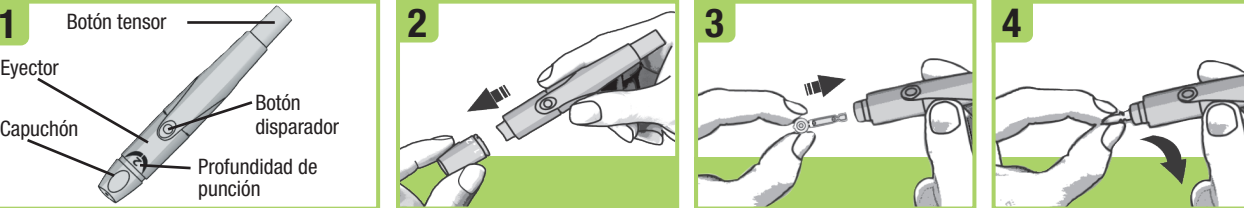


Familiarícese con el dispositivo de punción Accu-Chek Softclix.

Retire el capuchón del dispositivo de punción tirando de él directamente hacia fuera. El capuchón no es de rosca.

Inserte una lanceta en el dispositivo de punción hasta que encaje.

Quite el disco protector de la lanceta.

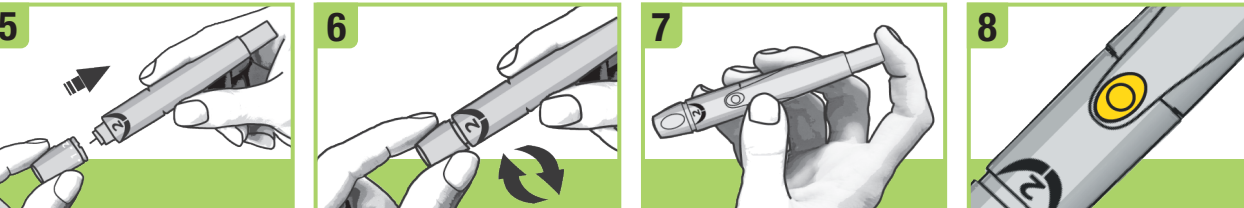

Vuelva a colocar el capuchón en el dispositivo de punción. Asegúrese de que la muesca del capuchón esté alineada con la muesca del dispositivo de punción.

Ajuste la profundidad de la lanceta a una profundidad de punción confortable. Empiece con la profundidad 2. Si su piel es gruesa, empiece con un ajuste mayor.

Empuje el botón tensor hasta el tope, como si fuera un bolígrafo. No pulse el botón disparador mientras está pulsando el botón tensor.

El botón disparador se vuelve amarillo cuando el dispositivo de punción está listo. Deje el dispositivo de punción a un lado hasta que Ud. esté listo para efectuar una punción en la yema del dedo.

Realizar una medición de glucemia



Lávese bien las manos y séquelas **antes** y **después** de realizar una medición de glucemia.

Compruebe la fecha de caducidad (**Use By**) del tubo de tiras reactivas. No use las tiras reactivas pasada su fecha de caducidad (**Use By**).

Retire una tira reactiva del tubo de tiras reactivas. Cierre el tubo herméticamente con la tapa.

Inserte el extremo metálico de la tira reactiva en el medidor.



Coloque el dispositivo de punción presionando firmemente contra el lateral de la yema del dedo y pulse el botón disparador amarillo para efectuar una punción.

Roce el **borde amarillo** de la tira reactiva con la gota de sangre. No aplique sangre encima de la tira reactiva. Retire el dedo de la tira reactiva cuando aparezca **Analizando**.

El resultado de medición aparece en la pantalla en menos de 4 segundos. Pulse para enviar el resultado de medición automáticamente a una bomba sincronizada. Si no se pulsa, el resultado de glucemia se visualizará con retardo en la bomba sincronizada.

Roche Diabetes Care, Inc.
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46256, USA
www.accu-chek.com

ACCUCHEK, ACCUCHEK GUIDE y SOFTCLIX son marcas registradas de Roche.

La marca denominativa *Bluetooth®* así como sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de los mismos por Roche se ha realizado bajo licencia.

MiniMed es una marca registrada de Medtronic, Inc.

© 2022 Roche Diabetes Care
09636153001-0422

